

Guide d'installation rapide

Philips Lifeline

Bouton mobile GoSafe

Communicateur
résidentiel filaire



PHILIPS
Lifeline


PHILIPS

ÉTAPE I


Découvrez votre nouveau système Lifeline

- ✓ Veuillez déballer ces articles.
- ✓ **Lorsque vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, appuyez sur votre bouton mobile GoSafe.**


Communicateur
résidentiel

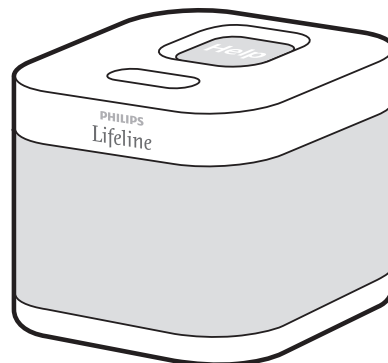

Bouton mobile
GoSafe

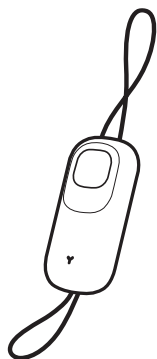

Chargeur

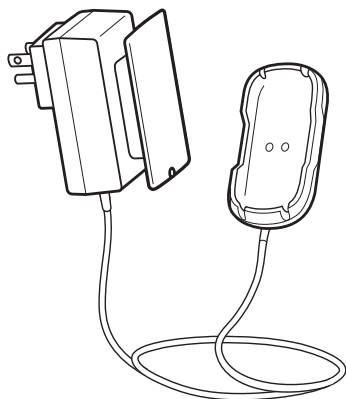


Votre bouton mobile GoSafe...

- est étanche et doit être porté dans la baignoire et sous la douche.
- peut servir à appeler à l'aide à tout moment, le jour ou la nuit.
- fonctionne à l'intérieur de votre domicile et à l'extérieur, lorsque le réseau sans fil AT&T est accessible.
- vous fournit un surplus de protection en appelant à l'aide s'il détecte une chute et que vous ne pouvez appuyer vous-même sur le bouton.


ÉTAPE 2

Apprenez comment charger le bouton

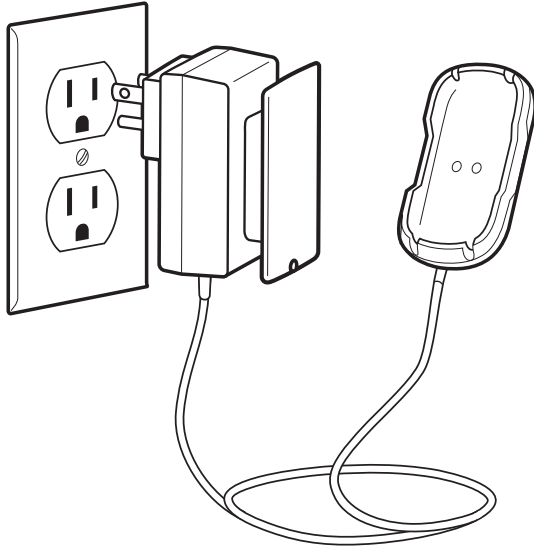

- ✓ Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans une prise de courant.


- ✓ Mettez le bouton mobile GoSafe autour de votre cou.
- ✓ Fixez le chargeur sur votre bouton mobile GoSafe.

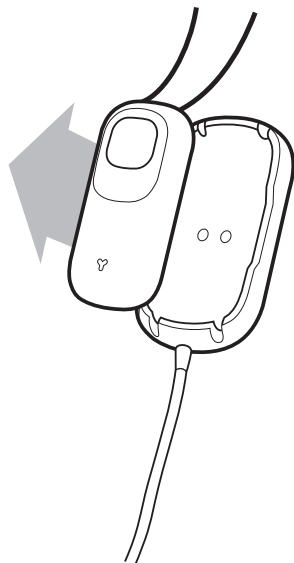

- ✓ Retirez le bouton mobile GoSafe du chargeur.

Vous finirez de le charger plus tard.

Vous devez charger votre bouton mobile GoSafe lorsque le voyant clignote en orange.

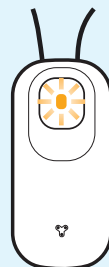

Voyant orange
clignotant =
charge requise




Voyant vert clignotant =
charge en cours




Voyant vert fixe =
pleine charge

ÉTAPE 3

Installez votre communicateur résidentiel

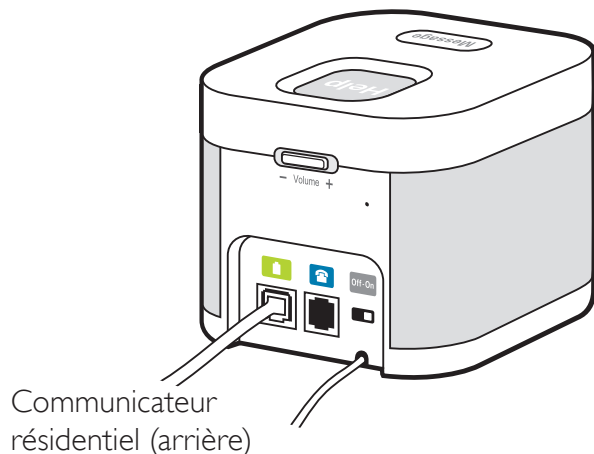

- ✓ Mettez le communicateur sous tension au moyen de l'interrupteur situé à l'arrière.

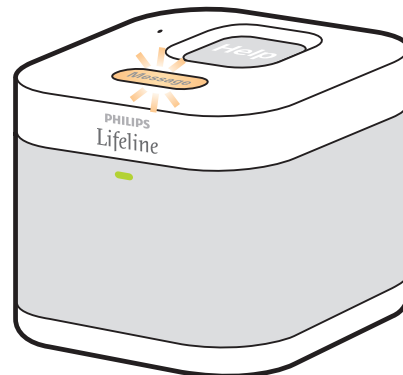


- ✓ Dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur le bouton **Message** orange qui clignote.



Conseils


- Choisissez un emplacement où une prise de courant se trouve à proximité d'une prise téléphonique (un téléphone peut être déjà branché dans la prise téléphonique).
- Veillez à ce que la prise de courant **ne puisse pas** être mise hors tension au moyen d'un interrupteur mural.
- Placez le communicateur résidentiel dans un endroit de la maison où vous passez la majeure partie de votre temps, comme votre chambre à coucher ou la salle de séjour.
- Évitez de placer le communicateur résidentiel à proximité d'appareils émettant un son fort, comme un téléviseur, une radio ou un climatiseur.

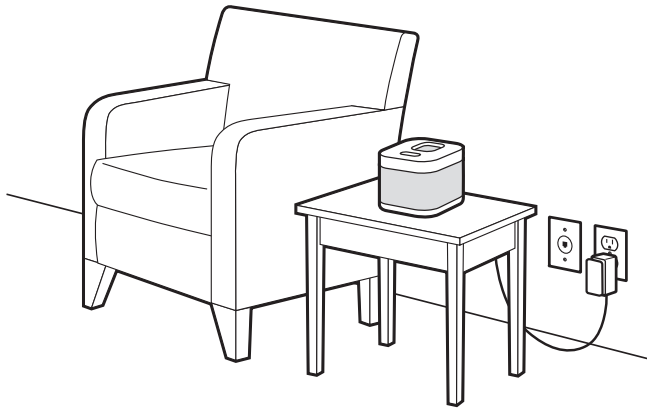


- ✓ Branchez le cordon d'alimentation dans une prise facilement accessible.
- ✓ Dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur le bouton **Message** orange qui clignote.

ÉTAPE 4

Branchez le cordon téléphonique

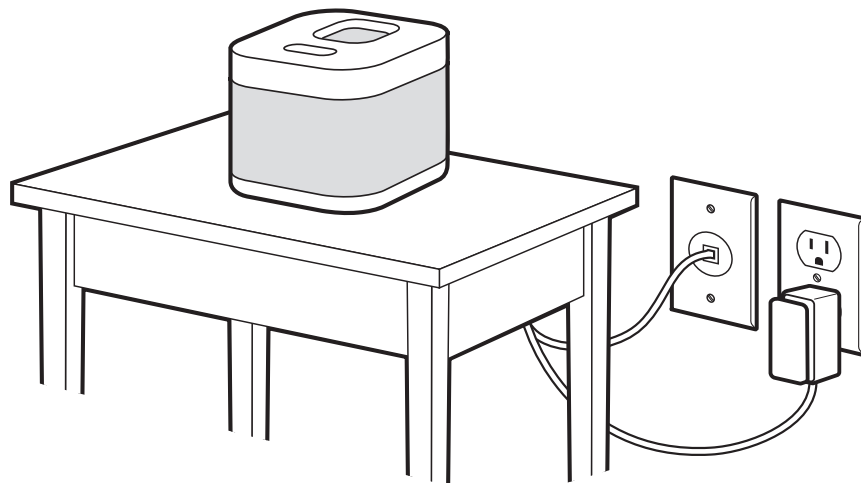

- ✓ Branchez le cordon téléphonique dans une prise téléphonique murale.
- ✓ Vous pourriez avoir à débrancher un autre téléphone de la prise murale.

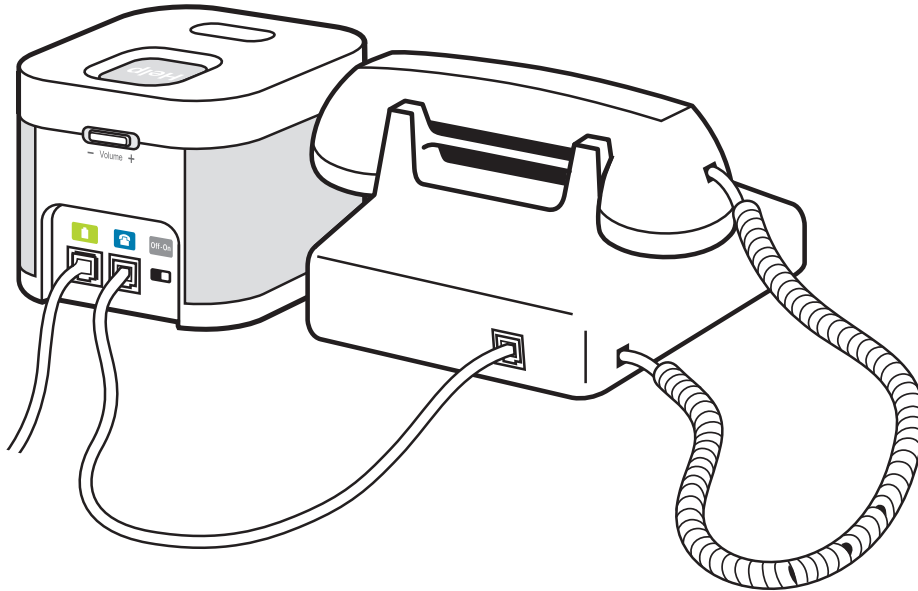

- ✓ Branchez votre téléphone dans la prise bleue située à l'arrière du communicateur résidentiel (facultatif).
- ✓ Dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur le bouton **Message** orange qui clignote.

ÉTAPE 5

Familiarisez-vous avec le fonctionnement de votre système Lifeline



- ✓ Veillez à mettre le bouton mobile GoSafe autour de votre cou.
- ✓ Appuyez sur le bouton mobile GoSafe que vous portez.



- ✓ Déplacez-vous d'une pièce à l'autre en appuyant chaque fois sur le bouton d'aide.
- ✓ Lorsque le voyant de votre bouton clignote, vous savez que cette pièce est dans la zone de portée du signal.
- ✓ Retournez au communicateur résidentiel et dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur le bouton **Message** orange qui clignote.

ÉTAPE 6


Établissez la connexion avec Lifeline



- ✓ Appuyez sur votre bouton mobile GoSafe.



Un appel à l'aide
est en cours.
Veuillez patienter.

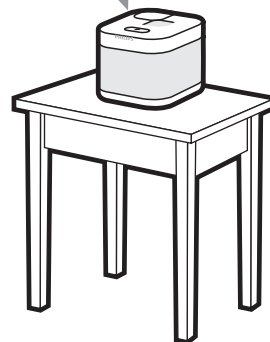

- ✓ Veuillez patienter pendant que votre premier appel est transmis à Lifeline.




Une dernière étape...

✓ Parlez au télésurveillant Lifeline.

Un télésurveillant Philips Lifeline spécialement formé répondra à l'appel et vous souhaitera la bienvenue. Si vous avez des questions, il pourra y répondre.

ÉTAPE 7

Terminez le chargement de votre bouton mobile GoSafe

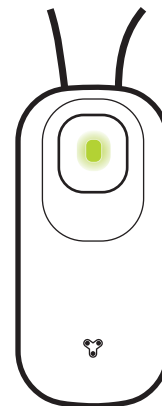

- ✓ Veillez à ce que le chargeur soit branché dans une prise de courant.
- ✓ Fixez votre bouton mobile GoSafe au chargeur (pour les détails, reportez-vous à l'étape 2).

Habituellement, le bouton mobile GoSafe se charge en moins de 45 minutes. Il est pleinement chargé lorsque le voyant vert est continuellement allumé.

Portez votre bouton mobile GoSafe en tout temps.



Dormez avec votre bouton mobile GoSafe.



Prenez un bain ou une douche avec votre bouton mobile GoSafe.



Déplacez-vous avec votre bouton mobile GoSafe
(en marchant, en conduisant, en faisant les courses).



Votre bouton mobile GoSafe appellera automatiquement à l'aide s'il détecte une chute durant l'une ou l'autre de ces activités.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le mode d'emploi.

- Votre bouton mobile GoSafe ne fonctionnera pas si le réseau sans fil AT&T n'est pas accessible.
- Pour optimiser la communication à l'extérieur de votre domicile, tenez votre bouton mobile GoSafe devant vous lorsque vous parlez au télésurveillant.

Bienvenue chez Philips Lifeline!

Nous désirons vous rappeler que notre Centre de télésurveillance, en activité jour et nuit, 365 jours par année, compte des télésurveillants Lifeline dévoués dont la seule responsabilité concerne votre bien-être et votre sécurité. Nous sommes persuadés que nos services vous apporteront la tranquillité d'esprit, la sécurité et une autonomie accrue.

En tant qu'abonné Lifeline, vous devriez avoir identifié des personnes qui ont accepté d'agir à titre de « Personnes-ressources ». Ce sont des personnes que Lifeline devrait appeler en cas d'urgence, s'il y a lieu. Ce sont, par exemple, des voisins, des amis, des parents, votre aide-infirmier actuel, etc. **Il est très important que vous teniez votre liste de personnes-ressources ainsi que leurs coordonnées à jour.** N'oubliez pas de communiquer avec Lifeline si une de vos personnes-ressources n'est plus en mesure de vous aider ou si elle change de numéro de téléphone.

Vous trouverez ci-joint un exemplaire des modalités de Lifeline. Veuillez prendre le temps nécessaire pour consulter attentivement ce document. **Le premier signal que nous recevons de votre communicateur Lifeline constitue une preuve de l'acceptation des modalités de Lifeline par le client.**

Pour terminer, nous vous informons que **l'équipement appartient à Philips Lifeline et qu'il doit être retourné lorsque le service n'est plus requis.** Pour faciliter le retour de l'équipement, nous vous conseillons de garder la boîte dans laquelle le communicateur Lifeline a été expédié.

Merci d'avoir choisi Philips Lifeline!

Pour un complément d'information, veuillez vous reporter au mode d'emploi. Si vous avez des questions au sujet de votre système filaire GoSafe, veuillez joindre Lifeline ou votre représentant au :

1-800-387-1215

Notes

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Philips Lifeline

111 Lawrence Street
Framingham, MA 01702-8156
Tel: 1-800-451-0525
www.lifelinesystems.com

Philips Lifeline Canada

95 Barber Greene Road, Suite 105
Toronto, Ontario, Canada M3C 3E9
Tel: 1-800-387-1215
www.lifeline.ca

Philips Lifeline

774, boul. Décarie, bureau 100
Saint-Laurent (Québec) H4L 3L5
Tel: 1-800-387-1215
www.lifeline.ca

© 2014. Tous droits réservés.

La portée du signal du bouton d'aide peut varier selon les facteurs environnants.

P/N 0940834, Rev. 01