


# Installer votre système HomeSafe cellulaire




## La procédure que vous devez suivre :

1. Veuillez mettre l'interrupteur situé à l'arrière du communicateur à la position ON.

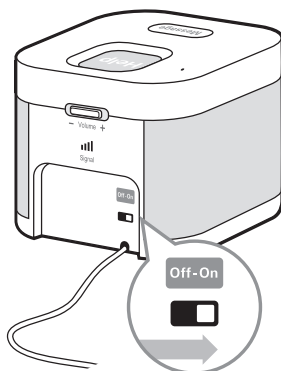

2. Dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur le bouton Message orange qui clignote.
3. Placez le communicateur résidentiel dans un endroit de la maison où vous passez la majeure partie de votre temps, comme votre chambre à coucher ou la salle de séjour.
  - a. Évitez de placer le communicateur résidentiel à proximité d'appareils émettant un son fort, comme un téléviseur, une radio ou un climatiseur.
  - b. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant. Choisissez une prise de courant qui ne peut pas être mise hors tension au moyen d'un interrupteur mural.
4. Après avoir branché le communicateur, vérifiez les barres indiquant l'intensité du signal. La force du signal doit afficher au moins deux barres.

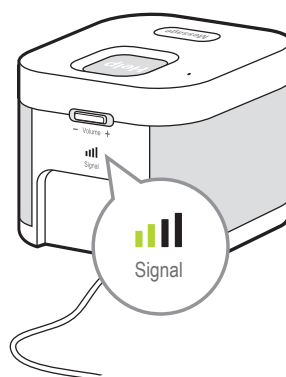

5. Dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur le bouton Message orange qui clignote.
6. Mettez votre bouton d'aide autour de votre cou.
7. Appuyez sur votre bouton d'aide.

**PHILIPS**  
**Lifeline**

8. Vérifiez la portée du signal :

- a. Déplacez-vous d'une pièce à l'autre en appuyant chaque fois sur le bouton d'aide.
- b. Lorsque le voyant de votre bouton clignote, vous savez que cette pièce est dans la zone de portée du signal.
- c. Retournez au communicateur résidentiel et dès que vous êtes prêt à continuer, appuyez sur le bouton Message orange qui clignote.

9. Établissez la connexion avec Lifeline :

- a. Appuyez sur votre bouton d'aide
- b. Veuillez patienter pendant que votre premier appel est transmis à Lifeline.
- c. Un télésurveillant Philips Lifeline spécialement formé répondra à l'appel et vous souhaitera la bienvenue. Si vous avez des questions, il pourra y répondre.

**Important :**

**Si vous appuyez sur le bouton et qu'aucun signal n'est transmis :** Contactez Philips Lifeline au 1 800 387-1215.

**\*Votre système HomeSafe cellulaire ne fonctionnera pas si le réseau cellulaire tiers n'est pas disponible.**